



*FirmAge*  
Firming Anti-Aging Device



---

## ----- Innehåll -----

Vad är RF.....	01
Fördelar med RF skönhets teknologi.....	01
Säkerhet.....	02
Försiktighetsåtgärder innan användning.....	02
Försiktighetsåtgärder efter användning.....	02
Funktioner.....	02
Produkt komponenter.....	03
Produkt Effektivitet.....	03
Produkt Fördelar.....	03
Snabb Instruktionsguide.....	04
Snabb Behandling.....	05
Djupgående Behandling.....	05
Grundläggande Hudvårdsmetoder.....	05
Laddningsmetoder.....	07
Rengöring och underhåll.....	07
Garanti.....	08

### **Vad är RF?**

Radio frekvens (RF) Ansiktsbehandling anses vara bland de mest effektiva icke kirurgiska procedurerna tillgängliga på marknaden idag. RF jobbar med radio vågor som penetrerar djupt ner i dermis (det djupaste lagret i huden) och subcutis som ger spänst i de underliggande hudlagren , och gör skillnad på fina linjer, rynkor och hudens textur.

Denna värme stimulerar kollagen produktionen. Det övergripande resultatet är spänstigare, friskare hud och sigifikant reduktion av slapp hud och rynkor.

Denna teknologi kallas också för Thermage

### --- **Fördelar med RF skönhets teknologi** ---

1. Säker  
Icke kirurisk, icke invasiv, smärtfri
2. Snabb  
Omedelbar spänst och lyft av huden och reduktion av rynkor
3. Kumulativ  
Stimulerar kontinuerligt förnyelsen av kollagen

---

## ----- Säkerhetsåtgärder -----

1. Denna maskin är endast till för ansiktsbehandlingar, använd den inte till något annat.
2. Använd enligt instruktionerna och korta ner användningstiden vid känslig hud
3. Använd inte maskinen under laddning. Den piper när den är fulladdad och indikatorljuset slutar blinka. Dra ur sladden och använd maskinen.
4. Håll inte maskinen på samma punkt mer än 3 sekunder för att undvika att bränna huden.
5. Tvätta inte maskinen i vatten eller i någon annan vätska. Använd alkohol sevetter för att desinficera maskinen efter användning.
6. Om du känner obehag när du använder maskinen, så stäng av och rådfråga en läkare.

### ----- Försiktighetsåtgärder innan användning -----

1. Använd ej på områden där hyaluronsyra eller kollagen blivit injicerat under de senaste 6 månaderna.
2. Använd inte på områden som injicerats med Botox, fillers eller silikon under de senaste 6 månaderna.
3. Använd inte på någon som är gravid, har hjärtproblem, pacemaker, har epilepsi eller stora metall implantat.
4. Använd inte på någon med Rosacea eller ytliga blodkärl.
5. Bär inga metall objekt vid användning
6. Rengör de områden som ska behandlas innan användning

### ----- Försiktighetsåtgärder efter användning -----

1. Det är normalt att huden blir torr efter behandlingen. Använd återfuktare och solskydd.
2. Tvätta inte huden med varmt vatten direkt efteråt, använd bara ljummet vatten.
3. Vi rekommenderar att använda en återfuktningssmask 3 gånger i veckan efter behandlingen.

## ----- Funktioner -----

- \* Innovativa mult-punkter med Bi-polära RF-behandlingsprober, som ger mer RF-energi och effektivt rejuvinerar huden
- \* hög energiinfraröd förbättrar terapeutisk effekt
- \* Enheten kan användas 3-4 timmar kontinuerligt efter en full-laddning
- \* Portabel och sladdfri, enkel att bära med sig för användning var som helst och när som helst
- \* Induktiv intelligents och energibesparande ergonomisk design-behandlingshuvudena fungerar endast vid kontakt med huden
- \*Låg, Medel, Hög nivå för olika funktioner och hudtyper
- \* Intelligent låg spännings indikator, laddnings- och full laddnings indikator

## Produkt Komponenter



- \* Enheten stänger automatiskt av om den inte används under 10 minuter
- \* Användaren måste hålla i de galvaniserade sidoplatåerna under RF Funktionen

## Produkt Effektivitet

1. 500 kHz elektromagnetisk RF-energi aktiverar kollagenreproduktionen, reducerar rynkor och lyfter huden
2. Stramar upp och lyfter slapp hud, förbättrar ansiktskonturen
3. De termiska effekterna förbättrar mikrocirkulationen, accelererar ämnesomsättningen, håller huden mjuk, elastisk och blank
4. RF förbättrar penetreringen av hudvårdsprodukter, främjar absorptionskapaciteten av huden. Kombinationen av RF skönhets maskin och hudvårdsprodukter fräschar upp, förskönar och föryngrar huden.
5. Våglängden av infravärme är 800 nm, den är osynlig för ögat. Den penetrerar djupt ner i huden och genererar termisk energi, som aktiverar celler, främjar blodcirkulationen och ämnesomsättningen, och håller huden frisk och elastisk




RF-krets-cirkel

Gitterelektrod

Kollagen återfödelse

## Produkt fördelar

- \* Hudspänst och porförminskning
- \* Framhäver ansikts konturen och reducerar dubbelhaka
- \* Aktiverar kollagen, ökar hudens elasticitet och ton
- \* Bleker mörka ringar under ögonen
- \* Reducerar rynkor på halsen

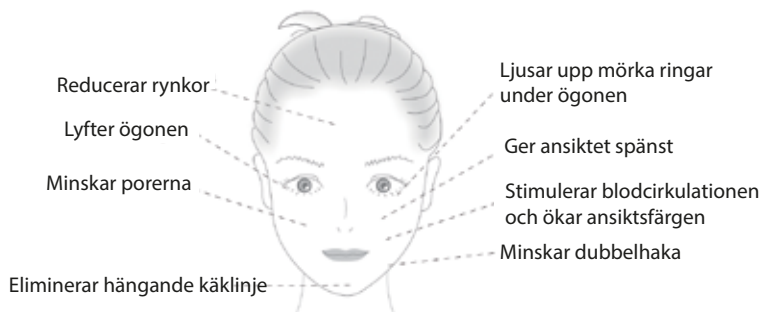

### Snabb Instruktionsguide

1. Rengör ansiktet innan behandling.
2. Applicera serum på hela ansiktet.
3. Sätt på enheten, tryck på "Thermage" knappen och välj Termisk nivå (L/M/H).
4. Tryck på "Infrared" för att starta infravärmen
5. Använd rätt behandlingsmetoder för olika områden (se instruktioner på nästa sida).
6. Stäng av enheten efter användning, rengör den och förvara den på rätt sätt.



Tips: Innan första behandlingen, testa enheten på armens övre insida

Tryck på "Thermage" knappen en gång, röd indikator (Låg nivå) lyser

Tryck på "Thermage" knappen två gånger, grön indikator (Medel nivå) lyser

Tryck på "Thermage" knappen tre gånger, gul indikator (Hög nivå) lyser




Det är normalt att känna stickningar eller värme under behandling-  
 en, man kan även bli lite röd på huden, men det försvinner efter  
 några minuter efter att behandlingen. Om huden skulle kännas  
 onormalt känslig, sluta genast använda maskinen och kyl ner huden  
 försiktigt. Konsultera en läkare om nödvändigt.

## ----- Snabb Behandling -----

### För att reducera rynkor, applicera serum och kräm

Placera behandlingshuvudet med ett fast tryck på huden, och flytta enheten kontinuerligt. Låt inte enheten stanna på ett område mer än 3 sekunder. Fortsätt att flytta maskinen till olika områden tills ansiktet i sin helhet är behandlat.

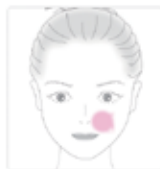

Maskinen stänger automatiskt av sig efter 10 minuter - detta är en behandlingscykel. Varje behandling tar 10-30 min. Vi rekommenderar att anvälja en lägre energinivå för behandling av ögonlock på grund av känsligheten i detta område.

## --- Grundläggande hudvårdsbehandling ---

### Lymfdränage, främja avgiftning och minska ödem

Placera behandlingshuvudet med ett fast tryck på artären nära nyckelbenet, och för enheten uppåt i en båge mot örat, och sedan tillbaka till nyckelbenet.



Denna rörelse skall upprepas flera gånger under 10 minuter.

### Minska dubbelhaka och mjuka upp linjer på pannan

### Reducing double chin and softening forehead lines

Placera behandlingshuvudet med ett fast tryck på hakan och dra sedan mot örat, flytta enheten nedåt till artären vid nyckelbenet. Flytta enheten åt motsatt håll, från nyckelbenet och dra uppåt mot käklinjen, flytta sedan mot dubbelhakan.



Denna rörelse skall upprepas flera gånger under 10 minuter.

### **Forma, strama upp och ge ansiktet en fin kontur**

Placera behandlingshuvudet med ett fast tryck på hakan, glid mot öronsribben. För sedan maskinen från öronsribben, bakom örat och nedåt mot nyckelbenet. Jobba i motsatt riktning, från nyckelbenet och uppåt mot käkbenet och tillbaka till hakan.



Denna rörelse skall upprepas flera gånger under 10 minuter.

Placera behandlingshuvudet med ett fast tryck vid sidan av munnen, i en båge till örat, bakom örat och nedåt till nyckelbenet. I motsatt riktning, från nyckelbenet, uppåt mot sidan av munnen.



Denna rörelse skall upprepas flera gånger under 10 minuter.

Placera behandlingshuvudet med ett fast tryck vid på kindbenet. För enheten i en båge mot örat, bakom örat och nedåt mot nyckelbenet. I motsatt riktning, från nyckelbenet upp mot käklinjen och tillbaka till kinbenet.



Denna rörelse skall upprepas flera gånger under 10 minuter.

### **Minska porer**

Främja kollagen förnyelsen, öka hudens elasticitet och minska porer. Placera behandlingshuvudet med ett fast tryck på näsvingen och flytta enheten till näsryggen, utifrån och in.

Upprepa rörelsen flera gånger.



Placera behandlingshuvudet med ett fast tryck på påsarna under ögonen ca 1 cm från ögat och dra enheten mot tinningen.

Upprepa rörelsen flera gånger.



## Laddningslägen

①



②



Laddning:

1. Anslut laddningsadaptorn till laddstationen.
2. Anslut laddningsadaptorn till nätkontakten.
3. Vid laddning blinkar det röda lampan. När laddningen är klar piper maskinen och det röda lampan slutar blinka.
4. Dra ut adaptorn från väggen efter laddning.

## Produktspecifikation

Artikel nummer	85953800468
Strömförsörjning	AC100-240V
Utgående Produktion	DC: 5V,0.8A
Energiförbrukning	5W
Mått	157x40x42mm
Vikt	150g

## Rengöring & underhåll

- ★ Rengör behandlingshuvudet och apparaten med mjuk borste och godkänd sterilisator. Tvätta inte med vatten direkt på maskinen eller lägg i blöt.
- ★ Använd inte vassa föremål eller metallföremål för att rengöra behandlingshuvudet för att undvika skador.
- ★ Var god lagra enheten i en sval och torr miljö